

EvoluChem™ PhotoChemical Product



加熱冷却可能！ 光反応装置

- 従来の光反応装置に加熱冷却機能を追加
- 0 ~ 80℃の間で光反応が可能
- 水やエチレングリコールを熱媒体として使用可能
- 本体はアルミニウム製

PhotoRedOx TC (Temperature Controlled)



HCK1006-01-025


● 従来の機能もそのまま！

同時に複数の反応を実施可能

各サンプルに対して均一に配光

スターラー使用可能


各種バイアルホルダーに対応 (フローも可能)

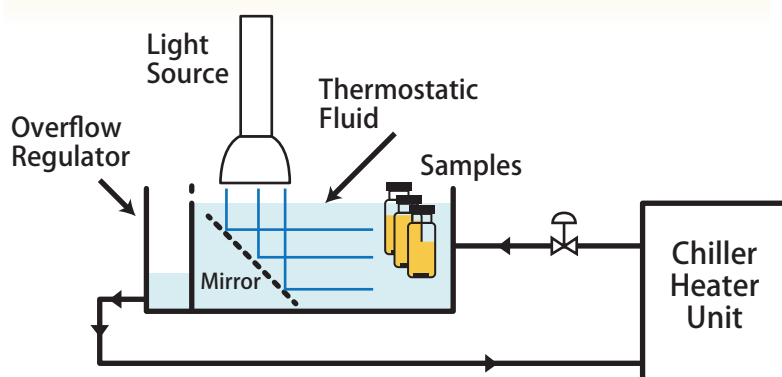

※本製品とは別に、外付けの循環式恒温槽が必要です。

※本製品には付属品のチューブが含まれています。

代表的な熱媒体と放射照度の関係

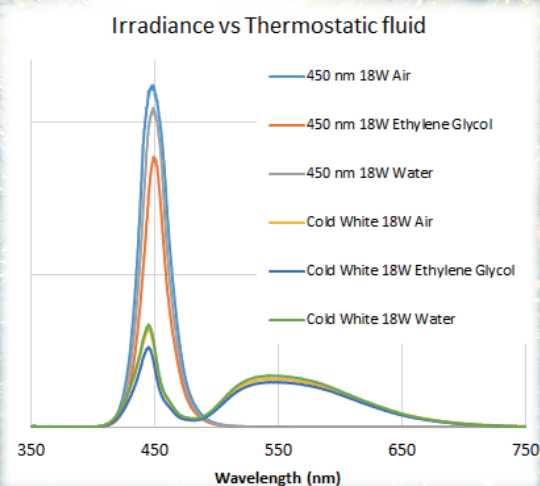

水やエチレングリコールなどの熱媒体を使用しても
照射効率の低下はほとんどありません！



重松貿易株式会社 化学品部
Shigematsu & Co., Ltd.

<大阪本社>

〒541-0047 大阪市中央区淡路町2丁目2番5号

TEL: (06)6231-6146 FAX: (06)6231-6149

WEB: www.shigematsu-bio.com/

<つくばライフサイエンスオフィス>

〒300-2655 茨城県つくば市万博公園西F26街区1インプレス103

TEL: (029)848-3220 FAX: (029)848-3221

Mail: info@shigematsu-bio.com